


LABORHITS

WHEATON® Bioreaktoren CELLine™

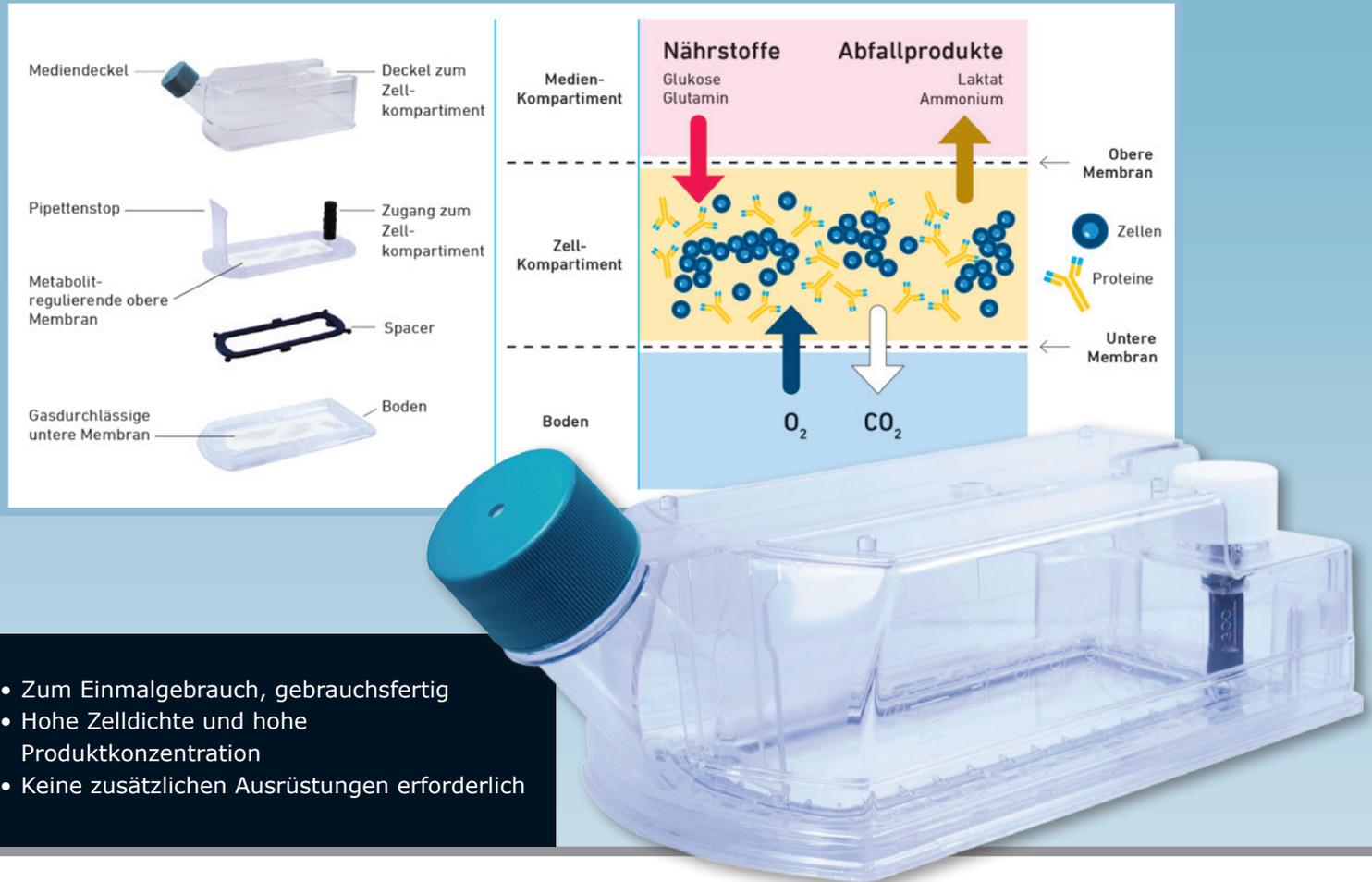

- Zum Einmalgebrauch, gebrauchsfertig
- Hohe Zelldichte und hohe Produktkonzentration
- Keine zusätzlichen Ausrüstungen erforderlich

Neue Serie membrangesteuerter Kulturflaschen für hochdichte Zellkulturen von WHEATON®. Diese Flaschen sind speziell für die Produktion von Antikörpern und Proteinen im kleinen Maßstab konzipiert. Herkömmliche *in vivo* oder *in vitro* Zellkulturverfahren können aufwändig sein, eine niedrige Zelldichte aufweisen und einen erheblichen Aufreinigungsaufwand erfordern. Diese Limitierungen, die bei statischen Gewebekulturflaschen häufig zu beobachten sind, werden von den neuen CELLine™ Flaschen überwunden.



Typ	Kulturart	Medien-Kompartiment ml	Zellen-Kompartiment ml	VE	Bestell Nr.
CELLine™ 1000	Suspension	1000	15	1	4.658 779
CELLine™ 1000	Suspension	1000	15	1	4.658 780
CELLine™ 1000-AD	Adhärent	1000	15	1	4.658 781
CELLine™ 1000-AD	Adhärent	1000	15	1	4.658 782
CELLine™ 350	Suspension	350	5	1	4.658 777
CELLine™ 350	Suspension	350	5	1	4.658 778